



Geräteständer VS450-800

Der Tischständer VS450-800 dient zur einfachen, präzisen Höhenverstellung des kontaktlosen Spektralfotometers VS450 von X-Rite, so dass sich Proben unterschiedlichster Form und Größe erfassen lassen.

Geräteständer VS450-800

Zur präzisen Einstellung des Messabstands wird der Sechskant-Schraubendreher im Lieferumfang des VS450 in die dafür vorgesehene Aussparung im Gerätefuß eingeführt. Der in die Aussparung eingeführte Schraubendreher wirft einen Schatten auf die Probenoberfläche, der bei Erreichen des korrekten Messabstands den projizierten Leuchtring des VS450 exakt halbiert. Nahezu alle Proben – auch flüssige Anstrichmittel oder Pulver, bei denen herkömmliche Systeme an ihre Grenzen stoßen – lassen sich damit präzise, sicher und wiederholgenau vermessen.

Produktmerkmale:

- Höhenverstellung zur exakten Anpassung des Messabstands
- Präzise schrittweise Verstellung (1,63 mm pro Umdrehung)
- Eignung für eine Probenhöhe bis zu 20,6 cm
- Komfortable Bedienung für Rechts- wie Linkshänder
- Wiederholgenaue Positionierung auf der Probenauflage dank eingraviertem Fadenkreuz
- Auflage und Querträger in robuster Bauweise mit Eloxalschicht
- Strapazierfähige Konstruktion


Abmessungen:

B: 35,6 cm, L: 38,7 cm,

H: 40,6 cm (*Spitze des Hebemechanismus*)



Der in die Aussparung eingeführte Schraubendreher wirft einen Schatten auf die Probenoberfläche, der bei Erreichen des korrekten Messabstands den projizierten Leuchtring des VS450 exakt halbiert.

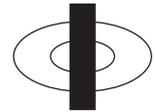

X-Rite: Ihre Quelle für korrekte Farbe, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit.

X-Rite ist ein weltweit führender Anbieter von Farbmesstechnik, die sämtliche Anforderungen in der Fertigung und Qualitätssicherung erfüllt. Ergänzt wird dieses Angebot um beispiellose Serviceoptionen, die eine unterbrechungsfreie Leistung aller X-Rite-Produkte garantieren. Schulungen und Lernmaterialien, die neuen wie auch erfahrenen Anwendern eine Optimierung der Farbmessung ermöglichen, stehen weltweit vor Ort oder online zur Verfügung.

Weitere Informationen über Produkte von X-Rite finden Sie im Internet unter www.xrite.com. X-Rite Kunden auf der ganzen Welt können sich auch an unseren Anwendungssupport unter der E-Mail-Adresse emeatechsupport@xrite.com oder an den Kundensupport unter der Rufnummer +800 700 300 01 wenden.



*X-Rite-Schraubendreher
(3/32", 76/813 mm)*

X-RITE – WELTWEITER HAUPTSITZ

Grand Rapids, Michigan, USA • +1 800 248 9748 • +1 616 803 2100 • xrite.com
© 2009, X-Rite, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

L10-409 DE (08/09)

